


| Avdeling for medisinsk biokjemi (AMB) | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Leukocytter | Hemoglobin | Ferritin | PT-INR** |
| Diff.telling av leuko. | MCH | Jern,TIBC, transferrin | APTT** |
| Neutrofile granuloc. | Retikulyocytter | Kobalamin (Vit.B12) | Fibrinogen** |
| Eosinofile granuloc. | Retikulyocyt-hemogl. | Folat | D-dimer** |
| Lymfocytter | Trombocytter | Haptoglobin | Antitrombin** |
| SR** NB! Eget EDTArør | HbA1c NB!Eget EDTArør | LD | CRP |
| Natrium | Glukose fastende | CK | CRP-HS |
| Kalium | Glukose | ALAT | Kalsium,fritt (pH7.40)** |
| Kreatinin/GFR estimert | C-peptid | GT | Kolesterol |
| Karbamid | Albumin | ALP | Triglyserider |
| Urat | Kalsium | Bilirubin, total ** | HDL-kolesterol |
| Osmolalitet | Fosfat | Amylase | LDL-kolesterol |
| TSH | FSH | hCG, graviditetsmarkør | PTH** |
| Fritt Tyroksin (FT4) | LH | DHEAS | Vitamin D |
| Fritt trijodtyronin (FT3) | Prolaktin | SHBG | ACE |
| Veksthormon (hGH) | Progesteron | Androstendion | ACTH** |
| IGF-1 ** | Østradiol | Renin** | Kortisol |
| | Testosteron | Aldosteron | |
| IgG | Magnesium | PSA | NT-Pro BNP |
| IgA | Aluminium** | CEA | Laktoseintoleranse gen. |
| IgM | Sink** | AFP | Hemokromatose gen. |
| S-proteinelektroforese | Kobber** | CA 125 | CD4/CD8-ratio** |
| Kappa/lambda-ratio | Bly** | CA 19-9 | CK-MB** |
| Trombofili** (pk) | Bikarbonat** | CA 15-3 | Lipase |
| Trombofili arvelig**(pk) | Vitamin A** | NSE | Total protein |
| Antimüllerhormon | Vitamin B1** | hCG, tumormarkør | ASAT |
| Homocystein** | Vitamin B2** (FAD) | Kromogranin A | |
| Metylmalonsyre | Vitamin B6** | Metanefriner** | |

Analyser merket med ** - Se elektronisk brukerhåndbok for spesiell prøvebehandling
 (www.stolav.no/lab - analysesøk)



Hver fargegruppe trenger alle hvert sitt **serum-gelrør** 5 mL

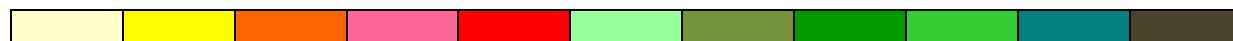

Hver fargegruppe trenger alle hvert sitt **EDTA-rør** 3 mL. OBS! SR gjøres nå på EDTA-rør!



Hver fargegruppe trenger alle hvert sitt **citrat-rør** 3,5 mL



Spesiell prøvetaking:

| | |
|---|--|
| SR: | Utføres ikke på tilsendte prøver. |
| Koagulasjons-analyser: | PT-INR – citratblod APTT – citratplasma. Holdbarhet kun 4 timer i romtemperatur Fibrinogen - citratplasma D-dimer – citratplasma (alternativt citratblod, se elektronisk brukerhåndbok) Antitrombin – citratplasma Protein C/S – citratplasma. Fryseprøve Begrenset holdbarhet, se elektronisk brukerhåndbok. |
| Trombofili: (analysepakke) | Krever citratblod, citratplasma, serum, EDTA-blod og frosset citratplasma, se elektronisk brukerhåndbok for spesiell prøvebehandling og antall rør. |
| Trombofili arvelig: (analysepakke) | Krever citratplasma, EDTA-blod og frosset citratplasma, se elektronisk brukerhåndbok for spesiell prøvebehandling og antall rør. |
| Bilirubin: | Serum. Prøve bør lysbeskyttes. |
| Antimüllerhormon: | Serum. Prøvematerialet pipetteres over i eget rør før forsendelse. |
| Metanefriner: | EDTA-plasma. Fryseprøve, se elektronisk brukerhåndbok. |
| ACTH : | EDTA-plasma. Fryseprøve, se elektronisk brukerhåndbok. |
| IGF-1/ PTH: | Serum. Fryseprøve. Trenger ikke komme frosset hvis ankomst laboratoriet på prøvetakingsdato. |
| Homocystein: | EDTA-plasma. Må sentrifugeres og skilles fra blodlegemene innen 30 min. etter prøvetaking. Må avpipetteres før forsendelse. |
| Renin: | EDTA-plasma. Fryseprøve, se elektronisk brukerhåndbok. Ved bestilling av Aldosteron/Renin ratio, kryss av for begge analyser og send begge prøver samme dag. |
| Aluminium: | K ₂ EDTA-rør med gel 5 ml (Vacuette/Vacutainer). Sendes uåpnet til laboratoriet. K ₂ EDTA-rør uten gel; spesiell behandling, se elektronisk brukerhåndbok. |
| Bly: | Natrium-heparin-rør. Mørk grønn kork med sort ring. Skal <u>ikke</u> sentrifugeres. Sendes uåpnet til laboratoriet. |
| Sink og kobber: | Vacuette serum-rør med gel 5 mL. Sentrifugeres innen én time. K ₂ EDTA-rør kan benyttes; spesiell behandling, se elektronisk brukerhåndbok. Serum-rør av typen Vacutainer kan ikke benyttes. |
| CK-MB: | Serum. Holdbarhet kun 8 timer i romtemperatur, må sendes frosset. |
| Methemoglobin: | Svært begrenset holdbarhet. Pasienten må ta prøven ved nærmeste sykehus. |